### V400

# Reflexion, Brechung und Beugung

Fritz Agildere fritz.agildere@udo.edu

Amelie Strathmann amelie.strathmann@udo.edu

Durchführung: 30. Mai 2023 Abgabe: 4. Juni 2023

TU Dortmund – Fakultät Physik

## Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung						
2	The	Theorie					
	2.1	Strahlenoptik	2				
		2.1.1 Reflexion					
		2.1.2 Brechung	3				
		2.1.3 Reflexion und Transmission	4				
	2.2	Wellenoptik	4				
		2.2.1 Beugung am Einzelspalt					
		2.2.2 Beugung am Gitter	5				
3	Dur	chführung	5				
	3.1	Versuchsaufbau	5				
	3.2	Versuchsaufgabe					
4	Vorl	bereitungsaufgabe	8				
5	Auswertung						
	5.1	Statistik	9				
	5.2	Reflexion	9				
	5.3	Brechung	11				
	5.4	Strahlversatz					
	5.5	Dispersion	13				
	5.6	Beugung	14				
6	5 Diskussion						
Lit	teratı	ur	16				
Ar	nhang		17				

## 1 Zielsetzung

Ziel des Versuches ist es, grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Strahlenoptik und der Wellenoptik zu untersuchen.

#### 2 Theorie

Im Folgenden werden elementare Begriffe der Strahlen- und der Wellenoptik eingeführt und erläutert.

Licht ist eine Form der elektromagnetischen Strahlung. Das optische Spektrum erstreckt sich von ultraviolettem Licht, welches in einem Wellenlängenbereich von 100 nm bis 380 nm vorkommt und reicht bis in das Infrarotspektrum, welches den Wellenlänenbereich von 780 nm bis 1 mm hat. Das für den Menschen sichtbare Licht ist dabei in dem Wellenlängenbereich von 380 nm bis 780 nm.

#### 2.1 Strahlenoptik

Für die Beschreibung von Refelxion und Brechnung an Grenzflächen können die Regeln der Strahlenotik angewandt werden. Dabei wird die Wellenausbreitung über die Normalen der Wellenflächen beschrieben. Diese wird als Lichtstrahl bezeichnet. Lichtstrahlen breiten sich in einem homogenen Medium gradlinig aus. Wenn sich zwei oder mehr Lichtstrahlen kreuzen haben diese keine Einflüsse aufeinander. Für unterschiedliche Materialien ist auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle anders. Daher wird beim Übergang von einem Medium in ein anderes die Welle gebrochen. Für die Aubreitungsgeschwindigkeiten  $v_1$  und  $v_2$  ergibt sich die Beziehung

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2}.\tag{1}$$

Dabei beschreibt der Winkel  $\alpha$  den Einfallswinkel und  $\beta$  den Ausfallswinkel, beide Winkel werden zur Normalen der Grenzfläche gemessen. n ist der Brechungsindex, welcher eine optische Materialeigenschaft ist. Wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medium 1 größer ist als die in Mediu 2, wird das Medium 1 als optisch dünner bezeichnet. Andersherum ist das Medium 1 optisch dicker.

#### 2.1.1 Reflexion

Für einen reflektierten Lichtstrahl, welche in Abbildung 1 zu sehen ist, gilt

$$\alpha_1 = \alpha_2 \tag{2}$$

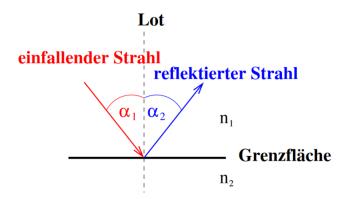


Abbildung 1: Refelxion an einer Grenzfläche. [1]

#### 2.1.2 Brechung

Wenn ein Lichtstrahl auf ein anderes Medium mit dem Brechungsindex n trifft, ändert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtstrahls in diesem. Der Lichtstrahl erfährt einen Richtungswechsel, sobald diese an der Grenzfläche auftrifft. Diese Richtungsänderung wird als Brechung bezeichnet, dies ist in Abbildung 2 dargestellt. Es gilt das Gesetz nach Snellius

$$n_1 \cdot \sin \alpha_1 = n_2 \cdot \sin \alpha_2. \tag{3}$$

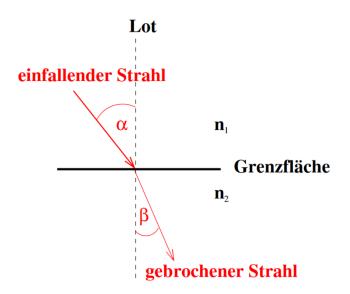


Abbildung 2: Brechnung an einer Grenzfläche. [1]

#### 2.1.3 Reflexion und Transmission

Normalerweise wird ein Lichtstrahl an einer Grenzfläche nicht ausschließlich relektiert beziehungsweise gebrochen. Daher wird ein Teil der Intensität R relektiert und der andere Teil T wird gebrochen und transmittiert. Siehe Abbildung 3 Es gilt immer R+T=1.

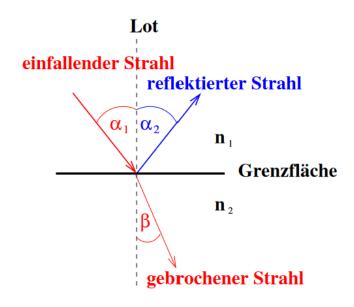


Abbildung 3: Refelxion und Transmission an einer Grenzfläche. [1]

#### 2.2 Wellenoptik

Es kann beobachtet werden, dass Licht sich im Schattenraum ausbreitet, wenn dieses auf ein Hindernis trifft. Dieses Phänomen wird als Beugung bezeichent und kann nicht mit der Strahlenoptik erklärt werden. Daher wird für die Erklärung die Wellenoptik herangezogen. Charakteristisch für eine elektromagnetische Welle ist die Frequenz  $\nu$  und die Wellenlänge  $\lambda$  und die Ausbreitungsgeschwindigkeit v der Welle. Bei der Überlagerung von zwei oder mehreren Wellen, kommt es zur Superposition derer Amplituden. Licht besteht aus vielen Wellenzügen, wen diese Wellenzüge dieselbe Frequenz und eine feste Phasenbeziehung haben, kommt es zu einem Interferenzbild. Je nach Phasenbeziehung kommt es zu einer Verstärkung, also einer konstruktiven Interferenz oder zu eine Abschwächung, einer destruktiven Interferenz. Zwei Wellen löschen sich vollkommen aus, wenn der Gangunterschied  $\lambda/2$  ist und die Intensitäten gleich sind. Die Ausbreitung einer Welle wird über das Huygensche Prinzip konstruiert. Dieses besagt, dass jeder Punkt einer Welle der Ausgangspunkt einer Elementarwelle gleicher Frequenz ist. Außerdem ist die Einhüllende aller Sekundarwellen zu einem späteren Zeitpunkt die neue Position der Wellenfront.

#### 2.2.1 Beugung am Einzelspalt

Trifft eine Wellenfront auf einen Spalt mit der Spaltbreite a, so werde alle Punkte dieser an der Spaltöffnung gebeugt. Für die gebeugten Wellen gilt die gleiche Frequenz und die gleiche Phasenbeziehung. In einem Abstand L wird ein Schrim plaziert. Auf diesem können dunkle und helle Interfrenzstreifen beobachtet werden. Für die hellen Maxima kann gesagt werden, dass diese an Stellen auftreten , für die gilt

$$\alpha \sin \alpha = k\lambda. \tag{4}$$

#### 2.2.2 Beugung am Gitter

Ein Mehrfachspalt oder auch Gitter genannt, besteht aus N-Einfachspalten gleicher Breite. Fällt eine Wellenfront senkrecht auf ein Strichgitter mit der Gitterkontsante d, können Bedingungen für Intensitätsminima und Intensitätsmaxima aufgestellt werden. Für die Intensitätsmaxima k-ter Ordnung gilt

$$d\sin\alpha = k\lambda. \tag{5}$$

Die Wellenlänge kann dementsprechend mit

$$\lambda = \frac{d\sin\alpha}{k} \tag{6}$$

bestimmt werden.

## 3 Durchführung

Im Folgenden wird der Versuchsaufbau erklärt und die Messdurchführung wird beschrieben.

#### 3.1 Versuchsaufbau

Die Abbildung 4 zeigt die transparente Grundplatte, welche zur Untersuchung der grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Strahlenoptik und der Wellenoptik verwendet wird.



**Abbildung 4:** Transparente Grundplatte auf der sich zwei Laserdiodenmodule befinden. [1]

Auf der Platte befinden sich zwei Laserdiodenmodule, welche Licht mit der Wellenlänge  $\lambda_{\rm rot}=635\,{\rm nm}$  und  $\lambda_{\rm grün}=532\,{\rm nm}$  emittieren. Diese Laserdioden lassen sich im Halbkreis bewegen. In der Mitte des Halbkreises lassen sich für die unterschiedlichen Versuchsaufgaben verschiedene geometrische Elemente einbauen.

#### 3.2 Versuchsaufgabe

Zunächst wird das Reflexionsgestz untersucht, indem der gründe Laser, die Vorlage a und der Halter mit dem Spiegel verwendet werden. Für 7 Einfallswinkel  $\alpha_1$  werden die Ausfallswinkel  $\lambda_2$  gemessen.

Als Zweites wird das Brechungsgesetz untersucht, dafür wird der Brechungsindex von Luft  $n_1=1$  genähert. Verwendet werden der grüne Laser, die Vorlage a und die planparallele Platte. Die Platte wird so positioniert, dass der Eintrittsspalt zur Winkelskala zeigt. Die Abbildung 5 zeigt den Prozess, bei dem der Lichtstrahl durch eine planparallele Platte geht und dabei zwei Brechungen erfährt.

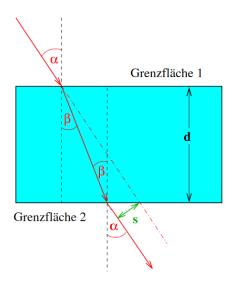


Abbildung 5: Strahlenversatz an einer planparallelen Platte. [1]

Der Strahlenversatz s lässt sich berechnen über die Gleichung

$$s = d \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \beta}. (7)$$

Bestimmt wird der Brechungswinkel  $\beta$  für 7 verschiedene Einfallswinkel  $\alpha$ .

Ein optisches Prisma wird durch nicht parallele Flächen begrenzt. Trifft ein Lichtstrahl in das Prisma ein, nennt man die beiden Grenzflächen, welches der Lichtstrahl durchläuft, brechende Kanten. Diese begrenzen den brechenden Winkel  $\gamma$  des Prismas. Die Abbildung 6 zeigt ein solches optisches Prisma.

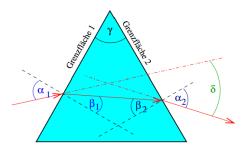


Abbildung 6: Optisches Prisma. [1]

Die Ablenkung  $\delta,$  die der Strahl beim Durchgang durch das Prisma erfährt, lässt sich über

$$\delta = (\alpha_1 + \alpha_2) - (\beta_1 + \beta_2) \tag{8}$$

berechnen. Es werden alle Messungen sowohl für den grünen als auch für den roten Laser durchgeführt. Verwendet wird die Vorlage c und das Prisma. Für jeweils 5 verschiedene Einfallswinkel  $\alpha_1$  im Bereich von 30° bis 80° werden die Ausfallswinkel  $\alpha_2$  gemessen.

Zum Schluss werden in die Halterung drei verschiedene Gitter eingesetzt. Dabei ist es drauf zu achten, dass das Laserlicht die Winkelskala des Transmissionsschirms bei 0° trifft und dass der Transmissionsschirm im Kreis um die Winkelskala der Vorlage angeordenet ist. Die Ablenkwinkel  $\gamma$  werden so direkt abgelesen. Die Gitterkonstanten der drei Gitter sind in Abschnitt 4 angegeben.

## 4 Vorbereitungsaufgabe

In der Tabelle 1 sind die Brechungsindizes verschiedener Materialien aufgelistet.

Tabelle 1: Brechungsindizes

Material	Brechungsindex
Luft	1.000922
Wasser	1.333
Kronglas	1.510
Plexiglas	1.49
Diamant	2.417

Für die drei verwendeten Gitter wurden die Gitterkonstanten berechnet und in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Gitterkonstanten d der drei Gitter.

Gitter $/\frac{N}{mm}$	Gitterkonstante $d$ /mm
600	0.00167
300	0.00333
100	0.00100

### 5 Auswertung

Im folgenden Abschnitt sollen die zuvor beschriebenen Zusammenhänge experimentell realisiert und überprüft werden.

#### 5.1 Statistik

Dazu ist an dieser Stelle zunächst das Vorgehen zur Behandlung von fehlerbehafteten Daten ausgeführt. Alle Messungen werden mit einer Unsicherheit von einer Einheit der jeweils zum Ablesen verwendeten Skala angegeben. Mithilfe von uncertainties [4] lassen sich diese Abweichungen bei der Berechnung abgeleiteter Größen mittels linearer Fehlerfortpflanzung automatisiert mitführen. Weiter gibt

$$\overline{x}_{\Delta} = \frac{\sum_{k} x_{k} / \Delta x_{k}}{\sum_{k} 1 / \Delta x_{k}}$$

das mit dem reziproken Fehler  $\Delta x_k$  gewichtete arithmetische Mittel einer Messreihe  $x_k$ an. Als zugehöriges Streumaß wird die Standardabweichung

$$\Delta \overline{x}_{\! \Delta} = \frac{1}{\sqrt{\sum_k 1/\Delta x_k}}$$

verwendet, sodass der Mittelwert  $x = \overline{x}_{\Delta} \pm \Delta \overline{x}_{\Delta}$  definiert werden kann. Zur grafischen Auswertung durch matplotlib [3] wird entlang den Datenpunkten eine lineare Regression unter Anwendung von numpy [2] durchgeführt. Abweichungen der Optimierungsvariablen werden dabei der Kovarianzmatrix entnommen.


#### 5.2 Reflexion

Unter Variation des Einfallswinkels  $\alpha$  wird in Tabelle 3 der Reflexionswinkel  $\beta$  aufgetragen, für den nach Reflexionsgesetz  $\beta = \alpha$  gelten muss. Das ebenso angegebene Verhältnis  $\beta/\alpha$  bemisst die relative Abweichung vom erwarteten Zusammenhang.

Für die in Abbildung 7 dargestellte Ausgleichsrechnung wird ein Modell der Form

$$\beta = A\alpha + B$$

herangezogen, wobei die Verschiebung B als zusätzlicher Freiheitsgrad dient.

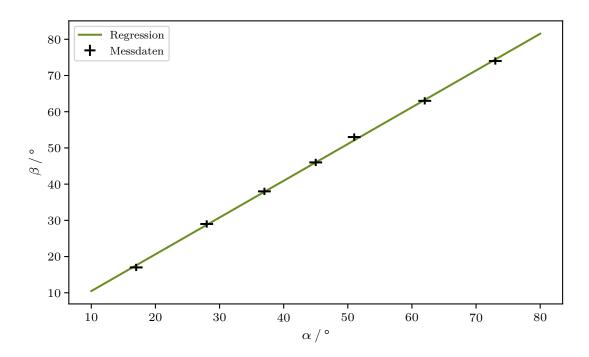

**Abbildung 7:** Reflexionswinkel  $\beta$  gegen Einfallswinkel  $\alpha$  aufgetragen.

Dies liefert die Parameter

$$A = 1,015 \pm 0,012$$
  $B = 0,323 \pm 0,554$ 

als Ergebnis. Mit der Geradensteigung  $A=1{,}015\pm0{,}012$  ist analog zum Winkelverhältnis ein Maß für die Güte der Theorie gegeben. Anhand der Messwerte in Tabelle 3 lässt sich dazu noch der Mittelwert  $\beta/\alpha=1{,}022\pm0{,}068$  schreiben.

Tabelle 3: Datenpunkte der Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  sowie deren Verhältnis.

α/°	β/°	$\beta/\alpha$
$73 \pm 1$	$74 \pm 1$	$1,014 \pm 0,020$
$62 \pm 1$	$63 \pm 1$	$1,016 \pm 0,023$
$51 \pm 1$	$53 \pm 1$	$1,039 \pm 0,028$
$45 \pm 1$	$46 \pm 1$	$1,022 \pm 0,032$
$37 \pm 1$	$38 \pm 1$	$1,027 \pm 0,039$
$28 \pm 1$	$29 \pm 1$	$1,036 \pm 0,051$
$17 \pm 1$	$17 \pm 1$	$1,000 \pm 0,083$

#### 5.3 Brechung


Laut Brechungsgesetz sollten Einfallswinkel  $\alpha$  und Brechungswinkel  $\beta$  eines Lichtstrahls an der Grenzfläche zwischen Luft mit Brechungsindex  $n_0 \approx 1$  und einer optisch dichteren planparallelen Platte aus Plexiglas mit n als Brechungsindex der Formel

$$\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = n$$

gehorchen. Es wird entlang der Messung in Tabelle 4 eine Regression nach

$$\sin(\beta) = A\sin(\alpha) + B$$

durchgeführt und das Ergebnis in Abbildung 8 angezeigt.

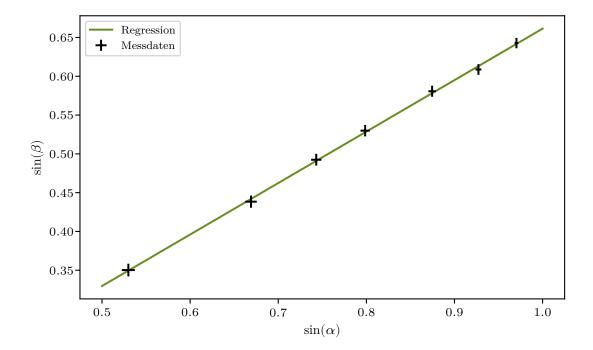

**Abbildung 8:** Brechungswinkel  $\sin(\beta)$  gegen Einfallswinkel  $\sin(\alpha)$  aufgetragen.

Anhand den so erhaltenen Fit-Parametern

$$A = 0.664 \pm 0.008$$
  $B = -0.002 \pm 0.006$ 

lässt sich aus dem Kehrwert von A der Brechungsindex  $n=1,507\pm0,018$  bestimmen.

**Tabelle 4:** Messung der Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  mit Brechungsindex n als abgeleiteter Wert.

$\alpha / ^{\circ}$	β/°	n
76	$40,0 \pm 0,5$	$1,510 \pm 0,016$
68	$37{,}5\pm0{,}5$	$1,523 \pm 0,018$
61	$35{,}5\pm0{,}5$	$1,\!506 \pm 0,\!020$
53	$32{,}0\pm0{,}5$	$1,\!507 \pm 0,\!023$
48	$29{,}5\pm0{,}5$	$1,\!509 \pm 0,\!026$
42	$26,0\pm0,5$	$1,\!526 \pm 0,\!031$
32	$20{,}5\pm0{,}5$	$1,513 \pm 0,041$

Über die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum  $c=2,998\cdot 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$  [5] und die Beziehung c=nv folgt mit  $n=1,507\pm 0,018$  die Geschwindigkeit  $v=(1,989\pm 0,024)\cdot 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$  für die Ausbreitung in Plexiglas. Analog liefert der Mittelwert  $n=1,513\pm 0,057$  mit  $c=(1,981\pm 0,075)\cdot 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$  ein leicht abweichendes Ergebnis.

#### 5.4 Strahlversatz

Zur Untersuchung der Verschiebung des Lichtstrahls wird weiterhin der bereits in Tabelle 4 einsehbare Datensatz für die planparallele Platte mit Dicke  $d=5,85\,\mathrm{cm}$  [1] genutzt. Deren Brechungsindex ist hier als Mittelwert  $n=1,509\pm0,117$  der vorherigen Ergebnisse angenommen. Aus geometrischer Überlegung lässt sich der Versatz

$$s = d \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos(\beta)}$$

in Abhängigkeit von Einfallswinkel  $\alpha$  und Brechungswinkel  $\beta$  formulieren.

**Tabelle 5:** Strahlversatz s mit verwendeten Winkelmessungen.

$\alpha$ / $^{\circ}$	$\beta$ / $^{\circ}$	$\hat{\beta}$ / °	$s / \mathrm{cm}$	$\hat{s}$ / cm
76	$40,0 \pm 0,5$	$40,0 \pm 3,7$	$4,49 \pm 0,06$	$4{,}49\pm0{,}17$
68	$37{,}5\pm0{,}5$	$37.9 \pm 3.5$	$3{,}74\pm0{,}06$	$3{,}72 \pm 0{,}22$
61	$35{,}5\pm0{,}5$	$35{,}4\pm3{,}2$	$3,09 \pm 0,07$	$3{,}10\pm0{,}24$
53	$32{,}0\pm0{,}5$	$32{,}0\pm2{,}8$	$2,47 \pm 0,07$	$2,47 \pm 0,24$
48	$29{,}5\pm0{,}5$	$29{,}5\pm2{,}5$	$2{,}13\pm0{,}07$	$2{,}13\pm0{,}23$
42	$26,0\pm0,5$	$26,3\pm2,2$	$1,79 \pm 0,07$	$1{,}76 \pm 0{,}21$
32	$20{,}5\pm0{,}5$	$20,\!6\pm1,\!7$	$1,\!25\pm0,\!07$	$1{,}24\pm0{,}17$

Tabelle 5 enthält die Brechungswinkel  $\beta$  aus direkter Messung sowie  $\hat{\beta}$  aus der Vorhersage des Brechungsgesetzes zum eingestellten Einfallswinkel  $\alpha$ . Entsprechend wird s aus  $\beta$  und  $\hat{s}$  aus  $\hat{\beta}$  berechnet.

#### 5.5 Dispersion

Nun wird ein Prisma aus Kronglas mit einem Brechungsindex n=1,510 und Innenwinkeln  $\gamma=60^{\circ}$  [1] verwendet. Durchläuft ein Lichtstrahl das Prisma, erfährt dieser abhängig von seiner jeweiligen Wellenlänge  $\lambda$  eine Ablenkung, welche sich nach

$$\delta = (\alpha_1 + \alpha_2) - (\beta_1 + \beta_2)$$

berechnet. Gemessen werden die Winkel  $\alpha$  in Luft, über  $\sin(\alpha) = n\sin(\beta)$  ergeben sich die Verläufe innerhalb des Mediums. Mithilfe der Beziehung  $\gamma = \beta_1 + \beta_2$  kann die Gültigkeit der Rechnung überprüft werden. Tabelle 6 gibt die Ergebnisse der Messung für grünes Licht mit  $\lambda = 532\,\mathrm{nm}$  an, in Tabelle 7 sind Daten und abgeleitete Größen zum roten Laser bei  $\lambda = 635\,\mathrm{nm}$  eingetragen.

**Tabelle 6:** Messwerte zur Bestimmung der Ablenkung  $\delta$  für grünes Licht.

$\alpha_1$ / °	$\beta_1$ / $^{\circ}$	$\alpha_2$ / $^{\circ}$	$\beta_2$ / $^{\circ}$	$\beta_1 + \beta_2 / °$	$\delta_G$ / $^{\circ}$
$35 \pm 1$	$22,3 \pm 0,6$	$66 \pm 1$	$37,2 \pm 0,3$	$59,6 \pm 0,7$	$41,4 \pm 0,8$
$42 \pm 1$	$26{,}3\pm0{,}5$	$57 \pm 1$	$33{,}7\pm0{,}4$	$60,0\pm0,7$	$39{,}0\pm0{,}7$
$49 \pm 1$	$30,0\pm0,5$	$48 \pm 1$	$29{,}5\pm0{,}5$	$59{,}5\pm0{,}7$	$37.5 \pm 0.7$
$54 \pm 1$	$32{,}4\pm0{,}5$	$42 \pm 1$	$26.3 \pm 0.5$	$58{,}7\pm0{,}7$	$37.3 \pm 0.7$
$67 \pm 1$	$37{,}6\pm0{,}3$	$33 \pm 1$	$21{,}1\pm0{,}6$	$58{,}7\pm0{,}7$	$41{,}3\pm0{,}8$

Im Mittel gilt eine Ablenkung von  $\delta_G = (39.2 \pm 0.4)^\circ$  für den grünen Laser.

Tabelle 7: Messwerte zur Bestimmung der Ablenkung  $\delta$  für rotes Licht.

$\alpha_1$ / °	$\beta_1$ / °	$\alpha_2$ / $^{\circ}$	$\beta_2$ / $^{\circ}$	$\beta_1 + \beta_2 / °$	$\delta_R$ / $^{\circ}$
$35 \pm 1$	$22,3 \pm 0,6$	$65 \pm 1$	$36,9 \pm 0,3$	$59,2 \pm 0,7$	$40.8 \pm 0.8$
$42 \pm 1$	$26{,}3\pm0{,}5$	$56 \pm 1$	$33{,}3\pm0{,}4$	$59,6 \pm 0,7$	$38,4 \pm 0,7$
$49 \pm 1$	$30,0\pm0,5$	$48 \pm 1$	$29.5 \pm 0.5$	$59.5 \pm 0.7$	$37.5 \pm 0.7$
$54 \pm 1$	$32{,}4\pm0{,}5$	$41 \pm 1$	$25{,}8\pm0{,}6$	$58{,}1\pm0{,}7$	$36.9 \pm 0.7$
$67 \pm 1$	$37.6 \pm 0.3$	$32 \pm 1$	$20{,}5\pm0{,}6$	$58{,}1\pm0{,}7$	$40,9\pm0,8$

Für rotes Licht gibt  $\delta_R = (38.8 \pm 0.4)^\circ$  den Mittelwert an.

#### 5.6 Beugung


Zuletzt soll die Wellennatur des Lichts untersucht werden. Zur Berechnung der Wellenlänge wird in den Tabellen 8 und 9 die umgestellte Gleichung

$$\lambda = d \, \frac{\sin(\varphi)}{k}$$

verwendet. Da Maxima nullter Beugungsordnung trivial sind und keine Rückschlüsse auf die Wellenlänge zulassen, werden sie an dieser Stelle vernachlässigt. Zur linearen Ausgleichsrechnung wird der Ausdruck

$$d\sin(\varphi) = \lambda k + \Lambda$$

mit konstantem Verschiebungsfaktor  $\Lambda$  gewählt.

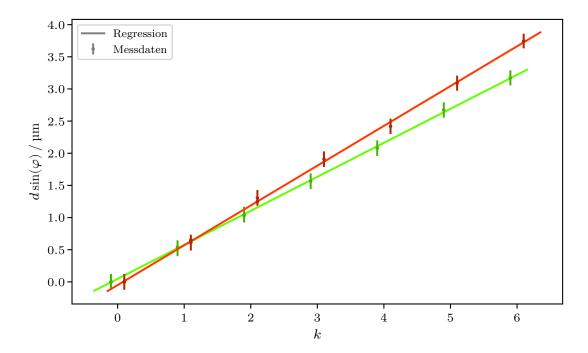

**Abbildung 9:** Wegunterschied  $d\sin(\varphi)$  gegen Beugungsordnung k aufgetragen. Passend farblich kodiert und zur besseren Lesbarkeit entlang der ganzzahligen Ordnung verschoben.

Aus den Daten für grünes Licht in Tabelle 8 ergeben sich

$$\lambda_G = (529 \pm 3) \, \mathrm{nm} \qquad \qquad \Lambda_G = (-6 \pm 8) \, \mathrm{nm}$$

als optimale Parameter. Die Koeffizienten

$$\lambda_R = (619 \pm 5) \, \mathrm{nm} \qquad \qquad \Lambda_R = (12 \pm 14) \, \mathrm{nm}$$

folgen aus den Messwerten in Tabelle 9.

Tabelle 8: Messwerte zur Bestimmung der Wellenlänge  $\lambda$  für grünes Licht.

$d/\mu m$	k	φ/°	$\lambda_G$ /	' nm
1,67	1	$19 \pm 1$ $19 \pm$	$543 \pm 28$	$543 \pm 28$
3,33	1	$9 \pm 1$ $9 \pm$	$521 \pm 57$	$521 \pm 57$
3,33	2	$18 \pm 1$ $18 \pm$	$515 \pm 28$	$515 \pm 28$
10,00	1	$3\pm1$ $3\pm$	$523 \pm 174$	$523 \pm 174$
10,00	2	$6\pm1$ $6\pm$	$523 \pm 87$	$523 \pm 87$
10,00	3	$9 \pm 1$ $9 \pm$	$521 \pm 57$	$521 \pm 57$
10,00	4	$12 \pm 1$ $12 \pm$	$520 \pm 43$	$520 \pm 43$
10,00	5	$16\pm1$ $15\pm$	$551 \pm 34$	$518 \pm 34$
10,00	6	$18 \pm 1$ $19 \pm$	$515 \pm 28$	$543 \pm 28$

Für den grünen Laser beschreibt  $\lambda_G = (527 \pm 2)\,\mathrm{nm}$  die mittlere Wellenlänge.

Tabelle 9: Messwerte zur Bestimmung der Wellenlänge  $\lambda$  für rotes Licht.

$d/\mu m$	k	φ/°	$\lambda_R$	/ nm
1,67	1	$23 \pm 1$ 23	$\pm 1$ 651 $\pm 27$	$651 \pm 27$
3,33	1	$11 \pm 1$ 11	$\pm1$ 636 $\pm57$	$636 \pm 57$
$3,\!33$	2	$22 \pm 1$ 22	$\pm 1$ 624 $\pm 27$	$624 \pm 27$
10,00	1	$3 \pm 1$ 4	$\pm 1$ 523 $\pm 174$	$4  698 \pm 174$
10,00	2	$7 \pm 1$ 8	$\pm1$ 609 $\pm87$	$696 \pm 86$
10,00	3	$11 \pm 1$ 11	$\pm1$ 636 $\pm57$	$636 \pm 57$
10,00	4	$14 \pm 1  14$	$\pm 1$ 605 $\pm 42$	$605 \pm 42$
10,00	5	$18 \pm 1$ 18	$\pm1$ 618 $\pm33$	$618 \pm 33$
10,00	6	$22 \pm 1$ 22	$\pm 1$ 624 $\pm 27$	$624 \pm 27$

Mit  $\lambda_R = (629 \pm 2)\,\mathrm{nm}$ ist der Mittelwert des roten Lasers angegeben.

## 6 Diskussion

#### Literatur

- [1] Anleitung zu Versuch 400, Reflexion, Brechung und Beugung. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2023.
- [2] Charles R. Harris u. a. "Array programming with NumPy". In: *Nature* 585.7825 (Sep. 2020), S. 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2. URL: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2.
- [3] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007. 55. URL: http://matplotlib.org/. Current version 3.6.2, DOI: 10.5281/zenodo.7275322.
- [4] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties.* Version 2.4.6.1. URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/.
- [5] Pauli Virtanen u. a. "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python". Version 1.9.3. In: *Nature Methods* 17 (2020), S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

## **A**nhang