V601

Der Franck-Hertz-Versuch

Fritz Agildere fritz.agildere@udo.edu

Amelie Strathmann amelie.strathmann@udo.edu

Durchführung: 16. Mai 2023 Abgabe:

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Zielsetzung | 2 |
|-----|--------------|---|
| 2 | Theorie | 2 |
| 3 | Durchführung | 6 |
| 4 | Auswertung | 6 |
| 5 | Diskussion | 6 |
| Lit | Literatur | |
| Ar | Anhang | |

1 Zielsetzung

Ziel des Versuches ist es die Energiedifferenz E_1-E_0 zwischen den ersten angeregten und dem Grundzustand eines Quecksilber-Atoms zu bestimmen. Bei diesem Experiment wird zudem das Bohrsche Atom-Modell in gewissen Umfang bestätigt.

2 Theorie

Der Franck-Hertz Versuch zählt zu dem Elektronenstoßexperimenten, welcher zur Untersuchung von elektronenhüllen dient. Es werden Quecksilber-Atome mit Elektronen beschossen, sodass elastische und inelastische Wechselwirkungen entstehen. Wenn es zu einem inelastischen Stoß kommt wird das Quecksilber-Atom aus seinem Grundzustand E_0 in den ersten Zustand E_1 gehoben. Für die Differenzen lässt sich das Verhältnis

$$\frac{m_0 \cdot v_{\text{vor}}^2}{2} - \frac{m_0 \cdot v_{\text{nach}}^2}{2} = E_1 - E_0 labeleqn : diff \tag{1}$$

aufstellen. Dabei ist m_0 die Ruhemasse des Elektrons und $v_{\rm vor}$ und $v_{\rm nach}$ entsprechen den Geschwindigkeiten des Elektrons vor und nach dem Zusammenstoß.

Es wird die Gegenfeldmethode verwendet, um die Energien der der Quecksilber-Atome zu bestimmen. der dazu verwendete Aufbau ist in Abbildung 1 zu sehen.

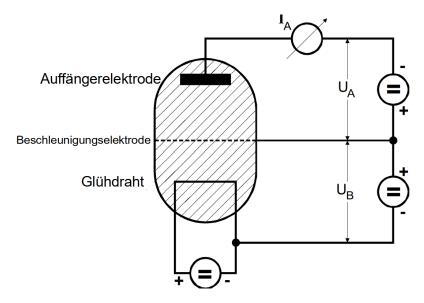


Abbildung 1: Der prinzipielle Aufbau des Frank-Hertz Versuches. [1]

Die Appeartur des Franck-Hertz Versuches besthet aus einem evakuierten Gefäß, welches winzige Tropfen Quecksilber beinhaltet. Das Quecksilber, verdampft gemäß der

Dampfdruckkurve bis sich ein Gleichgewichtsdampfdruck $p_{\rm sät}$ einstellt. Dieser ist von der Umgebenungstemperatur T abhängig, welche zur eingestellt werden kann, sodass die Dampfdichte reguliert werden kann. In den Glaskolben wird ein Draht aus Wolfram eingeführt. An Diesen wird eine Heizspannung angelegt, sodass aufgrund des glühelektrischen Effekt Elektronrn austreten. Gegenüber des Glühdrahtes befindet sich eine netzförmige Beschleunigungunselektrode an der eine Beschleunigungsspannung U_B angelegt ist, welche die Elektronen beschleunigt. Nach Durchlaufen der Beschleunigungsstrecke besitzen die Elektronen, welche vorher eine Geschwindigkeit von v=0 hatten, eine kinetische Energie mit

 $\frac{m_0 \cdot v_{\text{vor}}^2}{2} = e_0 \cdot U_B.$

 e_0 entspricht dabei der Ladung eines Elektrons. Hinter der Beschleunigungunselektrode befindet sich eine Auffänerelektrode. In dem Zwischenraum beider Elekteoden wird ein Gegenfeld mit der Spannung U_A angelegt. Somit wird die Auffängerelektrode ausschließlich von den Elektronen erreicht, welche die Bedingung

$$\frac{m_0}{2}v_Z^2 \ge e_0 U_A$$

erfüllen.

Es befinden sich Hg-Atome im Bescleunigungsraum, daher wechselwirken diese mit den Elektronen. dabei gibt es zwei Fälle von Wechselwirkung die auftreten können: Im ersten Fall ist die Elektronenenergie E nicht hoch, so kommt es njur zu elastischen Stößen. Aufgrund des Massenverhältnisses m_0/M ergibt sich ein vernachlässigbarer Energieverlust

$$\Delta E = \frac{4\,m_0\,M}{\big(m_0+M\big)^2} \cdot E \approx 1,\! 1\cdot 10^{-5}\,E\,.$$

Wichtig zu beacten ist dabei, dass die Elektronen beträchtliche Richtungsänderungen erfahren. Im zweiten Fall ist die Energie die Elektronen gleich oder größer der Energiedifferenz E_1-E_0 . Dan kommt es zu inelastischen Stößen. Auf die Quecksilber-Atome wird der Betrag der Energiedifferenz übertragen, wodurch diese angeregt werden. Daraufhin wird das Quecksilber-Atom unter Emission einer elektromagnetischen Welle wieder in den Grundzustand zurückgeführt. Der Lichtquant besitzt dabei eine Energie von

$$hv = E_1 - E_0,$$

wobei h
 das Plancksche Wirkungsquantum und ν die Frequenz der emittierten Strahlung
ist.

Um die Anregungsenergie der Hg-Atome zu bestimmen wird der Auffängerstrom I_A in Abhängigkeit zur Beschleunigungsspanung U_B betrachtet. Der idealisierte Verlauf ist in Abbildung 2 dargestellt.

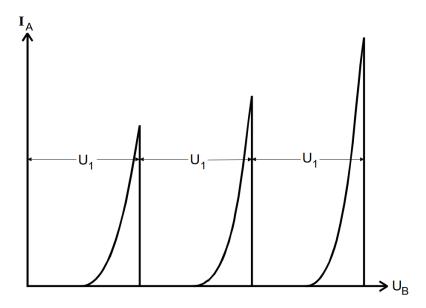


Abbildung 2: Der idealisierte Verlauf des Auffängerstroms I_A in Abhängigkeit zur Beschleunigungsspanung U_B . [1]

Es kann beobachtet werden, dass eine periodische Zu - und Abnahme des Anfängerstroms bei wachsender Beschleunigungsspanung passiert. Wenn durch das Erhöhen von U_B die Elektronenenergie E_1-E_0 erreicht oder überragt, treten unelastische Stöße auf. Dabei geben die Elektronen immer die Energiedifferenz E_1-E_0 ab. Der Abstand U_1 zweier aufeinader folgender Maxima muss dem 1.Anregungspotential entsprechen

$$U_1 := \frac{(E_1 - E_0)}{e_0} \,. \tag{2}$$

Es gibt drei wichtige Nebeneffekte die beachtet werden müssen bei der realen Franck-Hertz Kurve. Diese sieht nicht aus wie in Abbildung 2 gezeigt.

Das reale Beschleunigungspotential zwischen dem Glühdraht und der Beschleunigungselektrode ist von der außen angelegten Spannung U_B verschieden. Wenn beide Elketroden aus Materialien bestehen, die eine unterschiedliche Austrittsarbeit für Elektronen besitzen. Es wird für den Glühdraht ein Material ausgewählt, dessen Austrittsarbeit ϕ_G viel kleiner als die Austrittsarbeit ϕ_B der Beschleunigungselektrode ist. Das Potentialverhältnis ist in Abbildung 3 dargestellt.

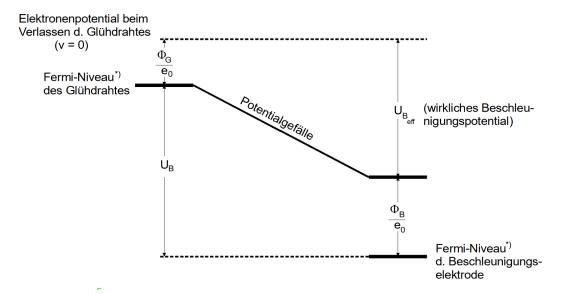


Abbildung 3: Potentialverhältnis zwiechen Glühkathode und Beschleunigungselektrode. [1]

Für das eigentliche Beschleunigungspotential $U_{B,eff}$ gilt

$$U_{B,eff} = U_{B} - \frac{1}{e_{0}} (\Phi_{B} - \Phi_{G}).$$
 (3)

Der Ausdruck

$$K = \frac{(\Phi_{\rm B} - \Phi_{\rm G})}{e_0} \tag{4}$$

entspricht dem Kontaktpotential. Die gemessene Franck-Hertz Kurve ist dabei um den Wert K verschoben.

Zunächst wurde die Annahme getroffen, dass die Elekronen nach Durchlauf des Beschleunigungsraumes alle eine einheitliche Energie besitzen. Duese Annahme ist jedoch unzutreffend. Die Leitungselektronen besitzen in Inneren eines Metalles bereits ein Energie-Spektrum, welches als Fermi-Dirac-Verteilung bezeichnet wird. Die unelastischen Stöße setzten bei einem sich erstreckten endlichen Einsatzbereich ein. Das führt dazu, dass sich die Franck-Hertz Kurve in ihren Anstieg bei Annäherung an ein Maximum verringern und nicht mehr unstetig auf den Wert 0 abfallen.

3 Durchführung

4 Auswertung

5 Diskussion

Literatur

[1] Anleitung zu Versuch 601, Der Franck-Hertz Versuch. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2023.

Anhang